
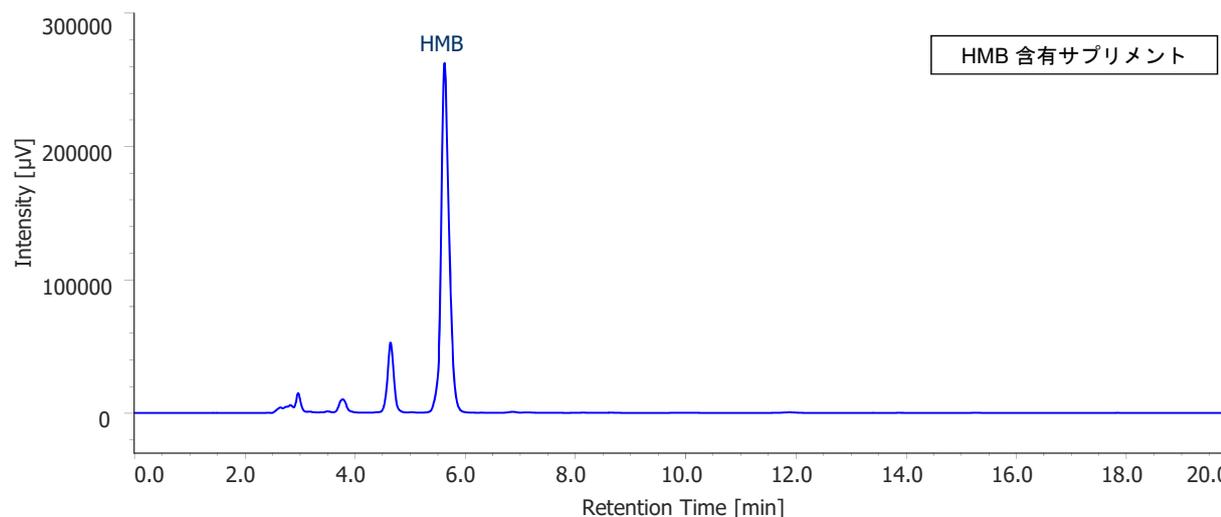


HMB (3-ヒドロキシイソ吉草酸) 含有 サプリメントの分析

<測定条件>

カラム : J-Pak Supero C18 (4.6 mm I.D. × 150 mmL, 5 μ m)
 検出 : UV-210 nm
 移動相A : 50 mM リン酸二水素アンモニウム水溶液 (リン酸にてpH 2.0に調整)/
 アセトニトリル (95/5)
 流量 : 0.6 mL/min
 カラム温度 : 35 $^{\circ}$ C
 測定試料 : HMB (3-ヒドロキシイソ吉草酸カルシウム) 標準溶液
 HMB 含有サプリメント

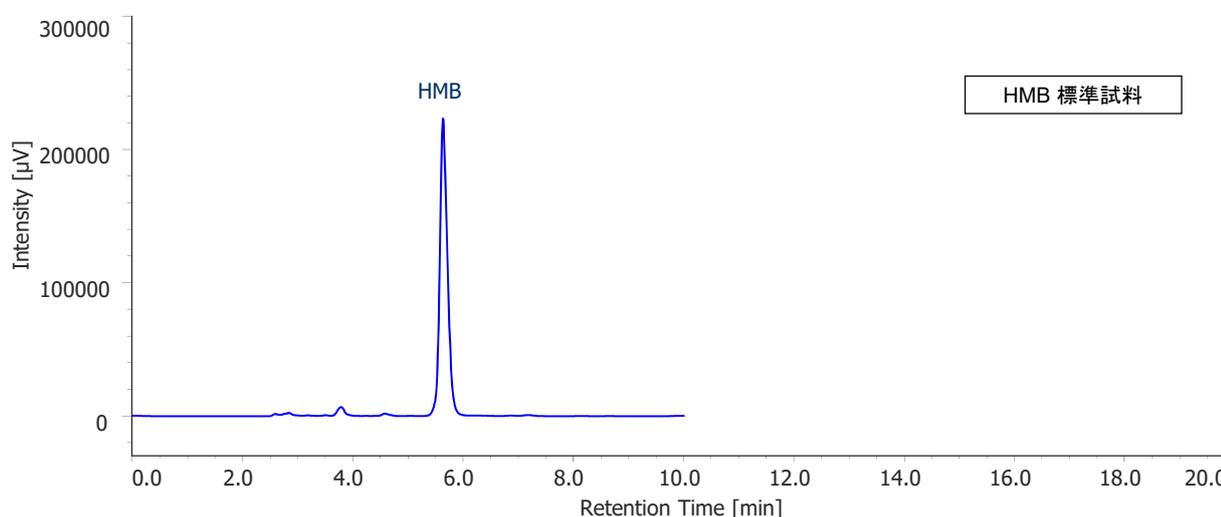

Keyword : HMB, HMBCa, 3-ヒドロキシイソ吉草酸, Supero C18, ODSカラム, UV検出器